




LONGRIDE




CITY
RIDE

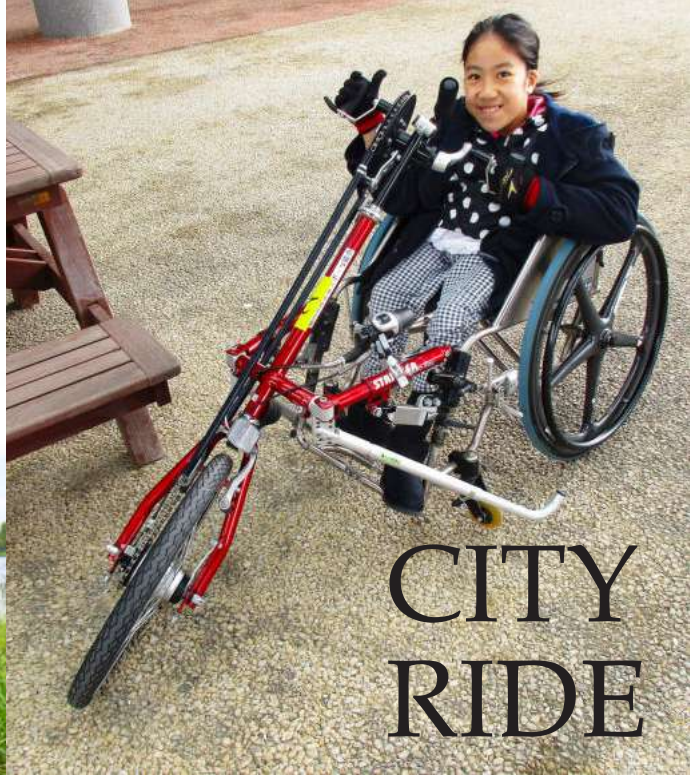

STRICKER

シュトリッカー
ハンドバイク


ラインナップカタログ

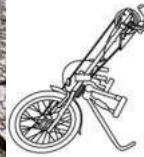

+



=

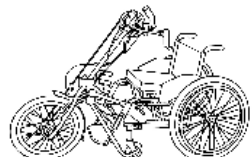

FUNRIDE

What's HANDBIKE?



ハンドバイクはその名の通り手でこぐ自転車です
お手持ちの車椅子に一輪とりつけてクランクを回せば
今までに味わったことのないような
風を切って走るスピードを体感できるでしょう
これまで躊躇していた段差や坂も乗り越えやすくなります


さあ あなたも
ハンドバイクでもっと遠くへ もっと楽しく

German Made, Tailor Made

1989年に創業したシュトリッカー社は
ヨーロッパでもっとも歴史のあるハンドバイクメーカーです

創業から現在まで
シュトリッカー社のハンドバイクは
ドイツの工房で職人の手によって
一台一台丁寧に作られています

長年の知識と経験の蓄積によって
あなたに最適の一台を提供します

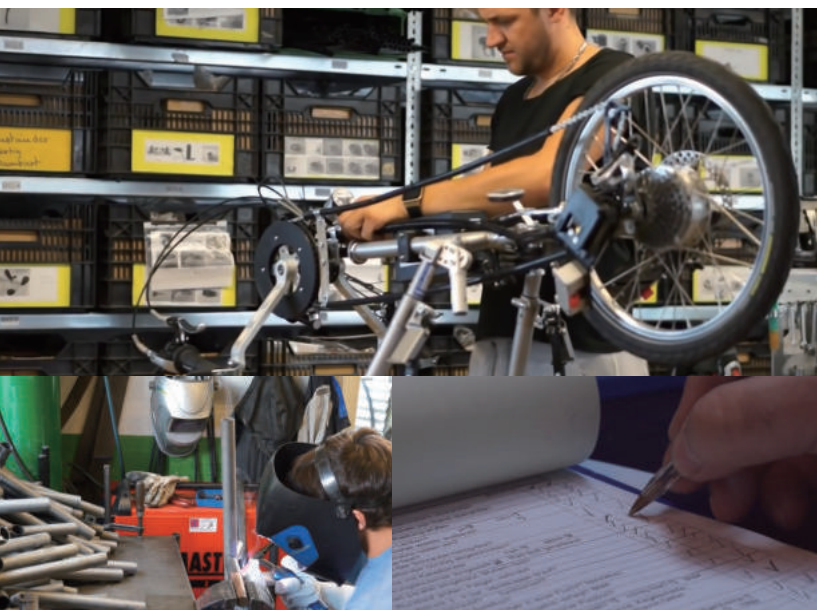



シティ・シリーズ

小回りが利くので街乗りにピッタリ
内装ギヤでメンテナンスも簡単です



シティ・セブン City 7

メンテナンスが簡単なエントリーモデルの
ハンドバイクです。

【仕様】
駆動輪：20インチ(オプションで24インチ可)
ギヤ：7段階シマノ製内装ギヤ
ブレーキ：コースターブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション：ベルトサイクルまたは
チェーン
フレーム：クロム・モリブデンに粉体塗装



シティ・マックス City Max

シティ・シリーズで最大のギア比を誇る
ハンドバイクです。

【仕様】
駆動輪：20インチ
ギヤ：シマノAlfine8段内装ギヤ+クランク
スプロケットギヤ板3枚=計24枚
ブレーキ：ディスクブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション：チェーン
フレーム：クロム・モリブデンに粉体塗装



シティ・イレブン City 11

シティ・セブンよりもギア比が大きく、
よりスピードを上げることができます。

【仕様】
駆動輪：20インチ
ギヤ：シマノ製11段内装ギヤ
ブレーキ：ディスクブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション：チェーン
フレーム：クロム・モリブデンに粉体塗装

※構造上、回転式グリップギアは取付できません
ギアチェンジはクリック式になります



シティ・コンフォート City Comfort

小回りの利く手軽な小径ハンドバイクです。
(日本限定モデル)

【仕様】
駆動輪：16インチ
ギヤ：5段階内装ギヤ
ブレーキ：コースターブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション：チェーン
フレーム：クロム・モリブデンに粉体塗装
総重量：11.5kg



シティ・コンパクト City Compact

持ち運びが便利な折りたたみ可能なハンド
バイクです。



【仕様】
駆動輪：16インチ
ギヤ：5段階内装ギヤ
ブレーキ：コースターブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション：ベルトドライブ
フレーム：クロム・モリブデンに粉体塗装
総重量：約10kg



シティ・キッドII City Kid II

お客様の体形に合わせて作られたミニサイ
ズのハンドバイクです。
(身長目安：130cm まで)

【仕様】
駆動輪：16インチ
ギヤ：5段内装ギヤ(1段107m)
ブレーキ：コースターブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション：チェーン
フレーム：クロム・モリブデンに粉体塗装
※フレームやグリップは、全て小さめに
つくられています。クランクの取付位置を
3段階調整できるショートクランクを採用。



ウルトラ・シリーズ

外装ギヤでパワフルに乗りたい方へ
ツーリングやアクティビティに最適



ウルトラ・スポーツ Ultra Sport

ギア比 1461%を備えた、アクティブユーザーのためのハンドバイクです。


【仕様】
駆動輪: 26インチ (ガーミッシュ)、24インチ (マンハイム)、20インチ (バーゼル)
ギヤ: スラム3段内装ギヤ+8段階外装ギヤ+クラクンスプロケットギヤ板3枚=計72段
ブレーキ: ディスクブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション: チェーン
フレーム: クロム・モリブデンに粉体塗装



ウルトラ Ultra

駆動輪の取り外しが容易な、ハブギアのないモデルです。

【仕様】
駆動輪: 20インチ (エアフルト)
ギヤ: スラム外装8段ギヤ+クラクンスプロケットギヤ板3枚=計24段
ブレーキ: ディスクブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション: チェーン
フレーム: クロム・モリブデンに粉体塗装

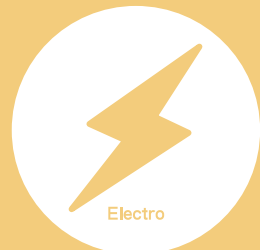

エレクトロ・シリーズ

電動アシストのサポートで
より快適な走行に

※エレクトロ・シリーズのハンドバイクは動力のみで走行することはできません



ネオドライブ Neodrive

充電回復機能やブレーキアシストを搭載した、電動アシストハンドバイクです。
※写真の荷台はオプションです。

【仕様】
重量: 23.15kg (バッテリー込)、19.80kg (バッテリー取外し時)
バッテリー: 36V/11.6Ah、3.35kg
充電器: 36V/14.5Ah
充電時間: 5h
フル充電時走行距離: 70km (平地の場合)
駆動輪: 20インチ、24インチ
ギヤ: 8段スラム製外装ギヤ
ブレーキ: ディスクブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション: チェーン
フレーム: クロム・モリブデンに粉体塗装



リポ・スマート Lipo Smart

坂道の多い場所でも安心な、リチウム電池式電動アシストハンドバイクです。

【仕様】
重量: 21kg (バッテリー込)、18.6kg (バッテリー取外し時)
バッテリー: 36V/11.6Ah、2.4kg
充電器: 36V/1.2Ah
充電時間: 9h
フル充電時走行距離: 40km (平地の場合)
駆動輪: 20インチ (オプションで24インチ可)
ギヤ: 8段スラム製外装ギヤ
ブレーキ: ディスクブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション: ベルトサイクルまたはチェーン
フレーム: クロム・モリブデンに粉体塗装
トルクセンサ: 非接触式
アシスト比: 15km/hまで50%、24km/hで0%



リポ・スマート (テトラ) Lipo Smart Tetra

握力のない方でも使用可能な電動アシストハンドバイクです。

【仕様】
重量: 21kg (バッテリー込)、18.6kg (バッテリー取外し時)
バッテリー: 36V/11.6Ah、2.4kg
充電器: 36V/1.2Ah
充電時間: 9h
フル充電時走行距離: 40km (平地の場合)
駆動輪: 20インチ (オプションで24インチ可)
ギヤ: 8段スラム製外装ギヤ
ブレーキ: ディスクブレーキおよびリム
ブレーキの二重ブレーキシステム
トランスミッション: ベルトサイクルまたはチェーン
フレーム: クロム・モリブデンに粉体塗装
トルクセンサ: 非接触式
アシスト比: 15km/hまで50%、24km/hで0%



車椅子前輪 ユニット


車椅子に取り付けることで
安定した三輪走行に



ロモ 360
Lomo 360

車輪が 360° 回転するモデルです。
※車椅子前輪ユニット・ハンドルなし

【仕様】
車輪:16インチ
【その他】
・オートマチックアジャスター

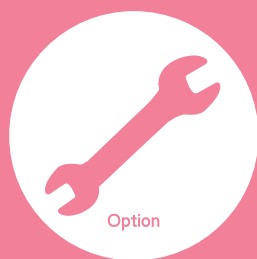

オプション パーツ

自分仕様の一台のために
細部までカスタマイズ

※その他多数をご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

●取付スタンド オプション



ハンドバイク単体の移動がラクラク
写真上:キャスター
写真下:360°自在に動きます

●回転式グリップギヤ



より直観的なギヤ操作が可能になります
(通常装備はギヤ切り替えスイッチ)

●四肢麻痺者仕様ツール テトラハンドル



テトラスイッチ




テトラグリップ



HANDBIKE COLUMN

ハンドバイクは、車椅子の前に一輪付けるアダプタータイプと
競技用で 사용되는一体型レースタイプの2種類に分かれます

後者のハンドバイクは、パラサイクリングのカテゴリーとして
またパラトライアスロン座位部門のバイク競技として
パラリンピック種目になっています

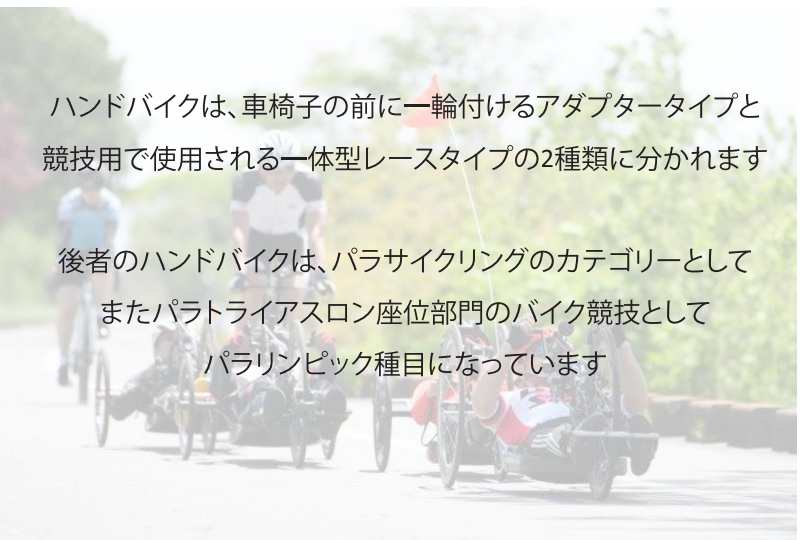

Q

毎回ハンドバイクをセッティングできるか心配です

初回にお手持ちの車椅子にきちんとセッティングできれば、乗るたびに調整し直す必要はありません。初回は車椅子に合わせてハンドバイクを調整するため販売店に取り付けていただくことをお勧めします。



Q

どの車椅子にも取り付けられるのですか？

シュトリッカーのハンドバイクは、ほとんどのすべての車椅子に取り付けることができます。ただし、一部構造的に難しいものもありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。



Q

消耗したパーツを交換したいのですが

もちろん交換可能です。
また、シュトリッカーではとても細かな部品もパーツとして販売しているため消耗品以外のネジやギヤの小さな部品までパーツ単位で交換できます。



Q

試乗はどこでできますか？

全国にあるハンドバイクの取り扱い可能な販売店をご紹介します。詳しくはお問い合わせください。また毎年ハンドバイクを中心としたパラサイクリングの大会が行われています。興味のある方はぜひお立ち寄りください。



パラクリテリウム in Naritaの様子

Q

保証はどのくらい？

購入から2年が保証期間となっています。
※消耗品を除く



メーカーによる製品の改良により、仕様や外観が予告なく変更することがあります。

製造 ドイツ・シュトリッカー社

総輸入販売元 株式会社テレウス

〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬 153-1 アセッツ松戸 102 号

TEL:047-369-1919 / FAX:047-308-4331

MAIL: info@terreus.co.jp http://www.terreus.co.jp

ハンドバイクをはじめ
様々な情報を発信中!

