



Supracor。 Biomimicry at its best®

## スティムライト®ハニカム(蜂の巣状)テクノロジー

### スティムライトとは？

スティムライトとは、本来宇宙飛行のために開発されたもので、特許取得済みの特殊なハイテク製法により、接着剤を使用せずに製造された革新的なハニカムシステムです。素材は毒性のない柔軟なポリウレタンを使用し、抗菌性、ならびに抗アレルギー性を有しています。また、その安全性・機能性などから、ボーイング787や747の旅客機の座席、F-18戦闘機やH60ブラックホークヘリコプター・V22オスプレーの座席にもクッション材として採用されています。

### スティムライトはどのように作用するのか？

柔軟性のあるハニカム構造は、圧力を吸収し、その圧力を-弱点となる箇所を避けて-効果的に広い面積に分散させる特徴を持っています。体圧も同じように緩和され、血行も促進されます。さらに、多孔質のハニカム組織は、ほかには見られないような通気性を持っています。

### スティムライトの通気性システムが持つ唯一の特色とは？

ハニカム組織には、タテヨコに小さな穴が開けられており、空気の入りが自由に行われます。それによって空気の循環が行われ、汗や汗によって発生する皮膚の軟化を予防することができます。

### スティムライトの特徴とは？

スティムライトは、空気を入れたり出したりすることがなく、ただその場におけばよいメンテナンスフリーのクッションです。ハニカムクッションの表面は使用する方にすぐになじむので、どのような方にも実用的です。また、他にはない特徴として、洗濯機や乾燥機にかけることができます。

### 保証

スティムライトのクッションは2年間の長期保証付きですが、ウレタンフォームのようにへたらないので、より長く、より安全にお使いいただけます。  
(クッションカバーの保証は90日間です)

# ハニカムテクノロジーがあなたの細胞に働きかけます

滑らかでモダンなSupracor社の革新的なスティムライト®ハニカムシートは、オフィス家具から航空宇宙機器までの幅広い座席用途において、近年では従来のクッション材（発泡材やゲル）よりも採用されています。

スティムライトは軽量で、その表面全体で均一に圧力を配分します。このハニカム構造は、圧力を緩和するために、圧縮されたときは屈曲するように厚いセルと薄いセルとが交互になるよう構成されています。


スティムライトクッションに座ると、圧縮されたセルが外側へ放射状に広がって解剖学的構造を支持し、優れた安定性を提供しながらそれぞれに自己調整します。

セルの壁の小さな穿孔で構成されたユニークな換気システムは、空気を水平方向と垂直方向の両方に循環させ、長時間座ることの出来る理想的な環境を作り出します。

1994年以来、スティムライトクッションは世界各国で褥瘡を予防するための性能が重要である車いすユーザーおよび寝たきりの患者などの医療分野で実績があります。


スティムライトクッションは、圧力、剪断力を減らして熱と湿気をコントロールします。それが褥瘡を予防する鍵となります。

スティムライトクッションは長時間快適に座るための特別な利点を提供します。柔らかなセルは、毛細血管の活動を刺激し、組織内の酸素化された血液を維持し、長期間座っているときに起こりうる痺れを軽減させます。

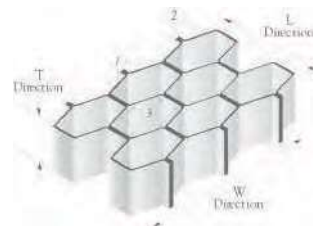


ハニカムテクノロジー

1. 「L」方向の二重壁  
(例：0.5mm厚)
2. 「W」方向の単壁  
(例：0.25mm厚)
3. 複数の多孔質  
(各壁に8つ以上)

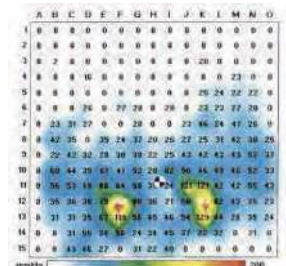

フォームクッション(体重100kg)

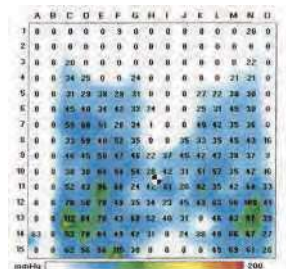

スティムライトクッション(体重100kg)

## ユーザーボイス



動画クリエイター/YouTuber(チャンネル名：現代のもののけ姫Maco)

渋谷 真子 さん 第8胸椎損傷 使用クッション：コントアXS

〈体圧分散だけじゃない通気性抜群のハニカム構造〉

私はお尻に汗をかきやすく、尿取りパッドを付けているためにとっても蒸れやすいです。ですが、スティムライトクッションは通気性が良いために夏場でも蒸れが軽減され、褥瘡予防にもなっています。


〈ベストな姿勢をつくりあげてくれる柔軟性の良さ〉

座っていると体に馴染み、適度な硬さだからこそ、座位の安定を感じる事ができます。車いすを漕ぐ際も、体の軸がブレにくく、下の物を取ろうとしてもお尻がずり落ちる事がないので、とても安定します。

〈丸洗い出来るクッション〉

洗濯機で丸洗いき、なおかつ乾燥機にも入れる事が出来るので、漏れてしまった時の処理がとても楽になりました。

自分の車いす生活をより豊かにしてくれるクッションだと思います。  
私はもう手放せません！

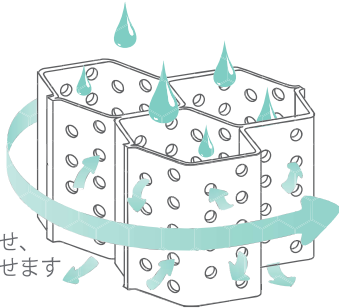

空気を循環させ、  
湿気を気化させます

換気システム

## 皮膚の保護


継続的に湿気があると皮膚は軟化し、褥瘡が発生しやすくなります。スティムライトのハニカム組織は多孔質であることから、空気をクッション内部で循環させ、湿気を気化させることができます。通気性のあるカバーは、皮膚の乾燥状態を保つのに役立ちます。スティムライトのクッションだけでなく、カバーもまた洗濯機や乾燥機にかけることができるので、最良の衛生状態を保つことができます。

## 圧力の緩和

ハニカム組織は、座ることによって発生する圧力を均等に分散することができます。スティムライトのクッションは、そのような圧力を緩和することにより、坐骨の弱点となる箇所への負担をやわらげることができます。その結果、坐骨は身体の周辺の部位と同じような圧力となります。

スティムライトクッションはさまざまな硬さの層によって、面状に非常に広く圧力が分散されて身体に適合します。

褥瘡リスクの高い方には、スティムライト・クラシック、またはスティムライト・コントゥアが適しています。

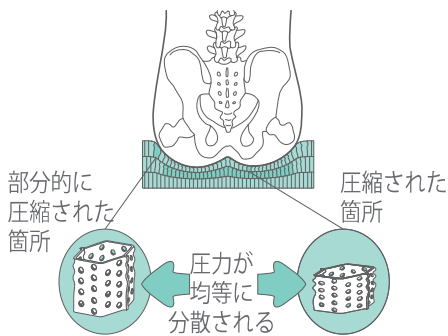

体圧の分散

## 摩擦の緩和


安定性だけでなくクッションの摩擦も、その素材の強度によって決まります。強度が低いと安定感が不足する一方、強度が強すぎると摩擦を高めます。

スティムライトクッションは安定感を損なうことなく摩擦力を和らげます。

一番上の層には、皮膚への摩擦を最小にするため、強度が低くなっています。

一番下の層は、最良の安定性を確保するために強度が高められています。

ハニカム組織の相互作用と伸縮性のあるカバーにより、皮膚に作用する体圧が緩和されます。

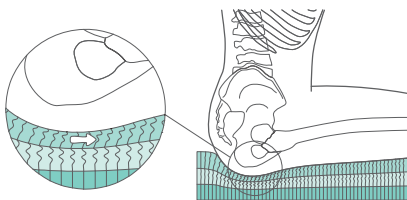

最少の摩擦力

摩擦力の軽減

## カットオプション

車いすに合わせてクッションの幅・奥行をカットする事ができます。

製品によってカット出来る最小サイズが異なります。

カット費用がかかりますので、販売店にお問い合わせください。

コントゥアアジャスタブルはカット不可の製品です。



Supracor®

# スプラコール スチームライトクッション コントア・アジャスタブル

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品

## コントア アジャスタブル

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：130kg

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14" x 16"	(36 x 41cm)	CDADJ1416	¥ 133,540 (税抜 ¥ 121,400)
16" x 16"	(41 x 41cm)	CDADJ1616	¥ 133,540 (税抜 ¥ 121,400)
16" x 18"	(41 x 46cm)	CDADJ1618	¥ 133,540 (税抜 ¥ 121,400)
18" x 16"	(46 x 41cm)	CDADJ1816	¥ 133,540 (税抜 ¥ 121,400)
18" x 18"	(46 x 46cm)	CDADJ1818	¥ 133,540 (税抜 ¥ 121,400)

## コントアXS アジャスタブル

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：120kg







サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14" x 16"	(36 x 41cm)	CDADJ1416X	¥ 133,540 (税抜 ¥ 121,400)
16" x 16"	(41 x 41cm)	CDADJ1616X	¥ 133,540 (税抜 ¥ 121,400)
16" x 18"	(41 x 46cm)	CDADJ1618X	¥ 133,540 (税抜 ¥ 121,400)
18" x 16"	(46 x 41cm)	CDADJ1816X	¥ 133,540 (税抜 ¥ 121,400)
18" x 18"	(46 x 46cm)	CDADJ1818X	¥ 133,540 (税抜 ¥ 121,400)


スチームライトクッション コントアアジャスタブルは、ユーザーの身体的・機能的ニーズに合わせてカスタマイズできる新たな可能性を備えた、人気のコントアクッションの次世代版です。

優れた姿勢保持と卓越した体圧分散を提供します。多層式のハニカムで絶妙なコントア形状を作り出し柔らかいエリアと硬めのエリアで特別に設計されています。クッション後方のくぼみは姿勢とその保持を改善するために最適な骨盤のポジションを提供します。

クッションの底に作られた調整用のくぼみによって、柔らかさの異なる複数の " ハニカムインサート " を選んで簡単にクッションをカスタマイズできます。

柔らかいインサートは硬いインサートと比較して、より沈み込みやすくなります。インサートをすべて取り外せば、臀部に骨突起のあるユーザーはさらなる安心感を得られます。沈み込みや皮膚の保護、ポジショニング特性に加え、クッション底部のインサート層は骨盤傾斜のようなポジショニングのニーズに合わせて使うこともできます。


イラスト	インサート	
	① 無し	座骨結節または他の骨突起から可能な限り圧力を取り除く必要がある方。
	② 白	筋緊張低下で褥瘡のリスクの高い方。骨盤への巻き込み（サポート）が増加します。
	③ ピンク	座位がやや安定しているユーザー ①のハニカムインサートなしと比較して褥瘡リスクの低い方。
	④ 黄色	座位が安定しているユーザー。 トランスファーが自立している方。①～③に比べ、褥瘡リスクの低い方。
	⑤ 上：白 下：ピンク	座位バランスが良く、さらに安定した座位が必要なユーザー。トランスファーが自立している方。自身で除圧プッシュアップが可能な方。
	⑥ 上：白 下：黄色	硬めの座り心地で、最も安定した座位を必要とするユーザー。除圧プッシュアップが可能な方。褥瘡のリスクが低いユーザー。

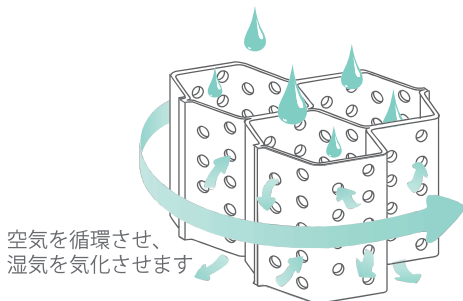

換気システム

### 皮膚の保護

継続的に湿気があると皮膚は軟化し、褥瘡が発生しやすくなります。スティムライトのハニカム組織は多孔質であることから、空気をクッション内部で循環させ、湿気を気化させることができます。通気性のあるカバーは、皮膚の乾燥状態を保つのに役立ちます。スティムライトのクッションだけでなく、カバーもまた洗濯機や乾燥機にかけることができるので、最良の衛生状態を保つことができます。

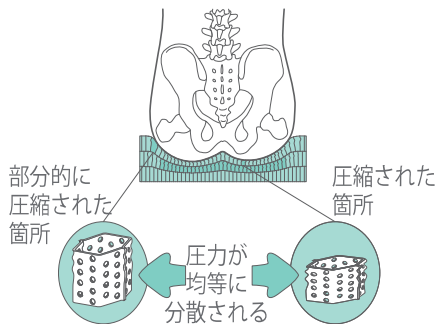

体圧の分散

### 圧力の緩和

ハニカム組織は、座ることによって発生する圧力を均等に分散することができます。スティムライトのクッションは、そのような圧力を緩和することにより、坐骨の弱点となる箇所への負担をやわらげることができます。その結果、坐骨は身体の周辺の部位と同じような圧力となります。スティムライトクッションはさまざまな硬さの層によって、面状に非常に広く圧力が分散されて身体に適合します。

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品



## クラシック フラットタイプ TAIS 01656-000001

高さ：7cm, 3層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：110kg  
褥瘡の危険性が高い方で、座位が比較的安定している方向向けのクッションです。2層目の両サイドの固さを変える事で、より良いラテラルサポートを提供します。

カット可能 最小可能サイズ10"x8" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	CL1415	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
14"x16"	(36x41cm)	CL1416	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
15"x15"	(38x38cm)	CL1515	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
16"x16"	(41x41cm)	CL1616	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
16"x18"	(41x46cm)	CL1618	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x16"	(46x41cm)	CL1816	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x18"	(46x46cm)	CL1818	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x20"	(46x51cm)	CL1820	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x16"	(51x41cm)	CL2016	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x18"	(51x46cm)	CL2018	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x20"	(51x51cm)	CL2020	¥ 115,500 (税抜 ¥ 105,000)

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品



## コントア コントアタイプ TAIS 01656-000003

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：130kg  
より高いレベルの座圧管理を必要としている方向向けのクッション。乗り移りの邪魔にならない程度に包み込む構造になっており、姿勢の安定性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ12"x12" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	CD1415	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
14"x16"	(36x41cm)	CD1416	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
15"x15"	(38x38cm)	CD1515	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
16"x16"	(41x41cm)	CD1616	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
16"x18"	(41x46cm)	CD1618	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x16"	(46x41cm)	CD1816	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x18"	(46x46cm)	CD1818	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x20"	(46x51cm)	CD1820	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x16"	(51x41cm)	CD2016	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x18"	(51x46cm)	CD2018	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x20"	(51x51cm)	CD2020	¥ 134,200 (税抜 ¥ 122,000)

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品



## クラシックXS フラットタイプ TAIS 01656-000002

高さ：7cm, 3層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：110kg  
クラシックのエクストラセンシティブモデル。より敏感肌の方向けのクッションです。最上層を柔らかくすることで、骨張っているところはより深く沈みます。

カット可能 最小可能サイズ10"x8" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	CL1415X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
14"x16"	(36x41cm)	CL1416X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
15"x15"	(38x38cm)	CL1515X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
16"x16"	(41x41cm)	CL1616X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
16"x18"	(41x46cm)	CL1618X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x16"	(46x41cm)	CL1816X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x18"	(46x46cm)	CL1818X	¥ 103,510 (税抜 ¥ 94,100)
18"x20"	(46x51cm)	CL1820X	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x16"	(51x41cm)	CL2016X	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x18"	(51x46cm)	CL2018X	¥ 112,750 (税抜 ¥ 102,500)
20"x20"	(51x51cm)	CL2020X	¥ 115,500 (税抜 ¥ 105,000)

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品



## コントアXS コントアタイプ TAIS 01656-000004

高さ：8~10cm, 3層構造 重さ：約2kg, 体重制限：120kg  
コントアのエクストラセンシティブモデル。痩せている方や、極端に骨張っている方、褥瘡を繰り返している方に、より深い沈み込みによって、安心と安定性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ12"x12" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	CD1415X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
14"x16"	(36x41cm)	CD1416X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
15"x15"	(38x38cm)	CD1515X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
16"x16"	(41x41cm)	CD1616X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
16"x18"	(41x46cm)	CD1618X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x16"	(46x41cm)	CD1816X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x18"	(46x46cm)	CD1818X	¥ 121,440 (税抜 ¥ 110,400)
18"x20"	(46x51cm)	CD1820X	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x16"	(51x41cm)	CD2016X	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x18"	(51x46cm)	CD2018X	¥ 132,000 (税抜 ¥ 120,000)
20"x20"	(51x51cm)	CD2020X	¥ 134,200 (税抜 ¥ 122,000)

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品



TAIS 01656-000005


## スリムライン ミドルコントアタイプ

高さ：6cm, 2層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：120kg  
褥瘡のリスクが比較的低い、アクティブユーザー向けの完璧なクッションです。微妙なコントア形状が最高の快適性と安定性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ12"x12" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	SM1415	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
14"x16"	(36x41cm)	SM1416	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
15"x15"	(38x38cm)	SM1515	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
16"x16"	(41x41cm)	SM1616	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
16"x18"	(41x46cm)	SM1618	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x16"	(46x41cm)	SM1816	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x18"	(46x46cm)	SM1818	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x20"	(46x51cm)	SM1820	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x16"	(51x41cm)	SM2016	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x18"	(51x46cm)	SM2018	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x20"	(51x51cm)	SM2020	¥ 96,800 (税抜 ¥ 88,000)

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品

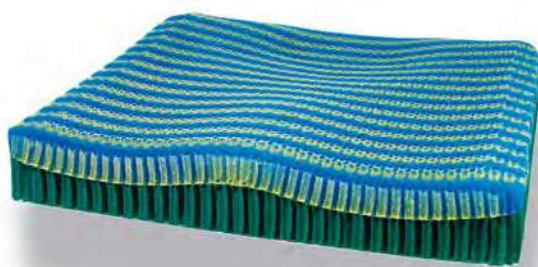

TAIS 01656-000006

## スリムラインXS ミドルコントアタイプ

高さ：6cm, 2層構造 重さ：約1.5kg, 体重制限：110kg  
スリムラインのエクストラセンシティブモデル。アクティブユーザーの中でも敏感肌の方に、安心と安定性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ12"x12" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
14"x15"	(36x38cm)	SM1415X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
14"x16"	(36x41cm)	SM1416X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
15"x15"	(38x38cm)	SM1515X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
16"x16"	(41x41cm)	SM1616X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
16"x18"	(41x46cm)	SM1618X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x16"	(46x41cm)	SM1816X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x18"	(46x46cm)	SM1818X	¥ 85,690 (税抜 ¥ 77,900)
18"x20"	(46x51cm)	SM1820	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x16"	(51x41cm)	SM2016X	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x18"	(51x46cm)	SM2018X	¥ 94,600 (税抜 ¥ 86,000)
20"x20"	(51x51cm)	SM2020X	¥ 96,800 (税抜 ¥ 88,000)

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品



TAIS 01656-000009

## コービー(子ども用) フラットタイプ

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約0.5kg, 体重制限：70kg  
最高の除圧性能、ずれの防止と熱をこもらせない通気性を提供することによって、子どもたちを褥瘡から守ります。

カット可能 最小可能サイズ8"x8" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
10"x10"	(25x25cm)	PD1010	¥ 71,060 (税抜 ¥ 64,600)
12"x12"	(30x30cm)	PD1212	¥ 71,060 (税抜 ¥ 64,600)
14"x14"	(36x36cm)	PD1414	¥ 71,060 (税抜 ¥ 64,600)

厚生労働省認可  
座位保持装置完成用部品




## コントア(子ども用) コントアタイプ

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約0.5kg, 体重制限：60kg  
微妙な内転・外転防止サポートと沈み込みによるアンカーによって適切な場所に確実に座ることができます。最適な座圧、安定性、ずれ防止と通気性の良さによって、子どもたちの皮膚を褥瘡から保護することを助けます。

カット可能 最小可能サイズ8"x8" (1インチ刻み)

サイズ	幅 x 奥行	製品番号	価格(税込)
10"x10"	(25x25cm)	PDCD1010	¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000)
12"x12"	(30x30cm)	PDCD1212	¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000)
14"x14"	(36x36cm)	PDCD1414	¥ 72,600 (税抜 ¥ 66,000)

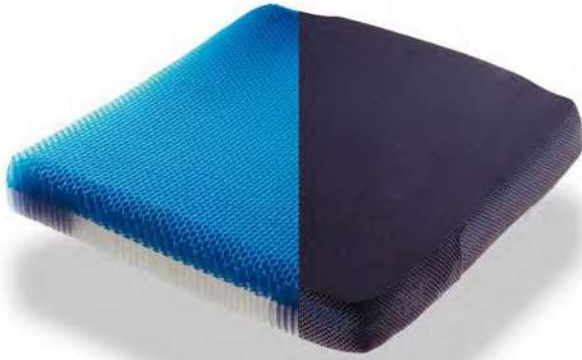

## スポーツ

フラットタイプ

TAIS 01656-000007

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約1kg, 体重制限：120kg  
アスリートやアクティブユーザーのための薄くて目立たない通気性のあるクッションです。スポーツ用にも日常用にも適しています。

カット可能 最小可能サイズ10"×8" (1インチ刻み)

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
14"×16"	(36×41cm)	SP1416	¥77,000 (税抜 ¥70,000)
16"×16"	(41×41cm)	SP1616	¥77,000 (税抜 ¥70,000)
16"×18"	(41×46cm)	SP1618	¥77,000 (税抜 ¥70,000)
18"×16"	(46×41cm)	SP1816	¥77,000 (税抜 ¥70,000)
18"×18"	(46×46cm)	SP1818	¥77,000 (税抜 ¥70,000)
18"×20"	(46×51cm)	SP1820	¥79,200 (税抜 ¥72,000)
20"×16"	(51×41cm)	SP2016	¥79,200 (税抜 ¥72,000)
20"×18"	(51×46cm)	SP2018	¥79,200 (税抜 ¥72,000)
20"×20"	(51×51cm)	SP2020	¥79,200 (税抜 ¥72,000)



## スマート


フラットタイプ

TAIS 01656-000008

高さ：5cm, 2層構造 重さ：約1kg, 体重制限：85kg  
究極の万能クッション。特別に設計された機能性・安定性・支持性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ10"×8" (1インチ刻み)

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
14"×15"	(36×38cm)	SMRT1415	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
14"×16"	(36×41cm)	SMRT1416	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
15"×15"	(38×38cm)	SMRT1515	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
16"×16"	(41×41cm)	SMRT1616	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
16"×18"	(41×46cm)	SMRT1618	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
18"×16"	(46×41cm)	SMRT1816	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
18"×18"	(46×46cm)	SMRT1818	¥80,300 (税抜 ¥73,000)
18"×20"	(46×51cm)	SMRT1820	¥82,500 (税抜 ¥75,000)
20"×16"	(51×41cm)	SMRT2016	¥82,500 (税抜 ¥75,000)
20"×18"	(51×46cm)	SMRT2018	¥82,500 (税抜 ¥75,000)
20"×20"	(51×51cm)	SMRT2020	¥83,600 (税抜 ¥76,000)

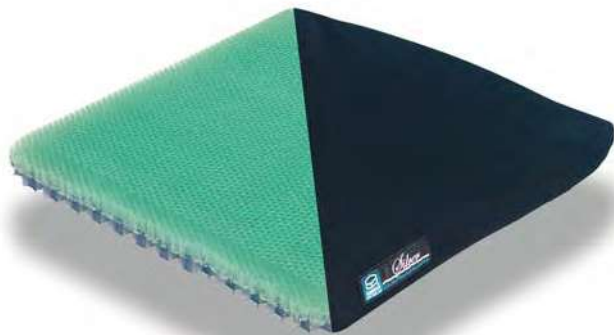

## シルバー

フラットタイプ


TAIS 01656-000010

高さ：4cm, 2層構造 重さ：約0.8kg, 体重制限：90kg  
褥瘡の危険性が比較的低い方のために特別に設計した薄いクッションです。ご家庭または外出先でも、特別な快適さと安定性を提供します。

カット可能 最小可能サイズ8"×6" (1インチ刻み)

サイズ	幅×奥行	製品番号	価格(税込)
16"×16"	(41×41cm)	SI1616	¥53,900 (税抜 ¥49,000)
16"×18"	(41×46cm)	SI1618	¥53,900 (税抜 ¥49,000)
18"×16"	(46×41cm)	SI1816	¥53,900 (税抜 ¥49,000)
18"×18"	(46×46cm)	SI1818	¥53,900 (税抜 ¥49,000)
18"×20"	(46×51cm)	SI1820	¥59,400 (税抜 ¥54,000)
20"×18"	(51×46cm)	SI2018	¥59,400 (税抜 ¥54,000)
20"×20"	(51×51cm)	SI2020	¥59,400 (税抜 ¥54,000)

## スチームライトクッション お手入れのアドバイス

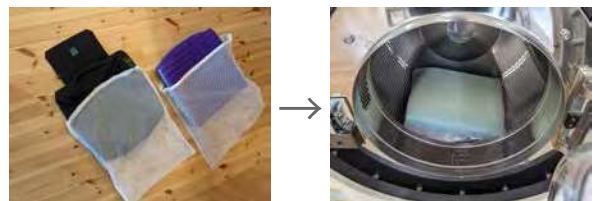

スチームライトクッションを洗濯、乾燥する際はクッションとカバーを別々にし、付属の洗濯ネットを使い洗濯機・乾燥機にかけてください。

家庭用洗濯乾燥機にかける場合、低温モードを選択してください。

カバーをかけずにクッションを直射日光(紫外線)に当たるとクッションの劣化の原因になりますので、乾かす際は陰干しにて乾燥してください。