



◆650,000円～  
(クッション別売)

## BRIDGE<sub>MD</sub>

(ブリッジMD) 


モジュラー式 電動車椅子

BRIDGE(ブリッジ)は「あなたと取り巻く環境を繋ぐ架け橋」をコンセプトに開発されました。420Wのハイパワーモーターが室内外を問わず、ストレスのない走りを実現。  
また約800パターンを持つシートアレンジにより、快適に座る事を追求しました。中輪駆動で小回り性の良いBridge-MDは、狭い環境での取り回しが抜群です。後輪駆動のBridgeは直進走行性の高いコンパクトなデザインです。



前輪スプリングサスペンション  
(標準装備)

### ■ シュラウドカバーカラー (BRIDGE)

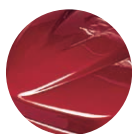

バーガンディー



シルバー



ブラック



ブルー

\*  印のある商品はデモ品を用意しております。



◆650,000円～  
(クッション別売)

# BRIDGE

(ブリッジ) 

モジュラー式 電動車椅子

## ■ 主な調整機能と標準装備 (Bridge-M/Bridge共通)




座幅の調整  
(約36・41・46・51cm)

座板がスライド式になっているのでパーツの交換をせずに体型に合わせた座幅調整ができます。



座奥の調整  
(約40・43・45.5cm)

フットサポートがスライド式になっているので座奥を伸ばす事ができます。

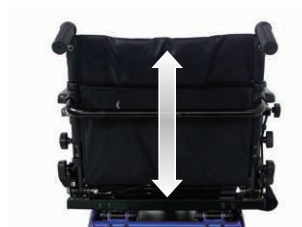

張り・高さ調整式  
バックサポート

背シートの高さ調整機能とベルトの張り調整により、最適な座り心地と安定した姿勢を保つ事ができます。



座角・背座角の調整

座席の角度調節と背シートの角度調節ができます。

## ■ フレームカラー



ウェットブラック



ワインレッド



ナイルグリーン



シルバーメタリック



ディープブルー

| ス ペ ッ ク 表                                           | AVIVA RX<br>(アビバ)                                                                                | TDX SP2<br>(ティディエックス)                                    | BRIDGE/BRIDGE-MD<br>(ブリッジ)    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 座 幅                                                 | 38~53cm<br>(約5cmピッチ)                                                                             | 40.6~55.8cm<br>(約2.5cmピッチ)                               | 36~51cm<br>(約5cmピッチ)          |
| 座 奥                                                 | 41~51cm<br>(約5cmピッチ)                                                                             | 40.6~58.4cm<br>(約2.5cmピッチ)                               | 40・43・45cm                    |
| 前座高 1)普通型<br>2)チルト式<br>3)リクライニング式<br>4)チルト&リクライニング式 | ①43.5cm ②46cm ③48.5cm<br>①43.5cm ②46cm ③48.5cm<br>①43.5cm ②46cm ③48.5cm<br>①43.5cm ②46cm ③48.5cm | ①42cm ②47cm<br>①44cm ②46cm<br>①44cm ②46cm<br>①44cm ②46cm | ①45cm ②49cm<br>—<br>—<br>—    |
| 背 高 1)普通型<br>2)チルト式<br>3)リクライニング式<br>4)チルト&リクライニング式 | ①48cm ②54cm ③56~79cm<br>①48cm ②54cm ③56~79cm<br>①48cm ②54cm ③56~79cm<br>①48cm ②54cm ③56~79cm     | 46~61cm<br>46~64cm<br>50.8~68cm<br>50.8~68cm             | 42~52cm<br>—<br>—<br>—        |
| 背 角 度                                               | 90°~120°                                                                                         | 75°~116°                                                 | 95°・105°・115°                 |
| アームサポート高さ                                           | ①24.5~31.5cm<br>②29.5cm~36.5cm                                                                   | 25~40cm<br>(2.5cmピッチ)                                    | 27~31.5cm<br>(1.5cmピッチ)       |
| アームパッド長さ ①デスクタイプ<br>②フルタイプ                          | 32.5cm<br>37.5cm                                                                                 | 25cm<br>36cm                                             | 35cm<br>25cm                  |
| アームサポート機能 ①高さ調節<br>②着脱<br>③跳ね上げ                     | ●<br>●<br>●/×                                                                                    | ●<br>●<br>●                                              | ●<br>●<br>×                   |
| 全 幅                                                 | 56cm                                                                                             | ①61cm(22NF)<br>②65cm(24GEL)                              | BRIDGE 58cm<br>BRIDGE-MD 62cm |

\*座幅約40cmの場合の全体幅で、シート幅を広げる事によって全幅が大きくなることがあります。

|         |                                 |                               |                                    |
|---------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 全 長     | 103cm~130cm<br>(座奥40cm、標準足台の場合) | 116cm<br>(座奥40cm、標準足台の場合)     | 103cm<br>(座奥40cm、標準足台の場合)          |
| 車 輪     | 9×14インチ<br>(前輪×後輪)              | 6×14×6インチ<br>(前輪×中輪×後輪)       | BRIDGE 8×12インチ<br>BRIDGE-MD 6×10×6 |
| 走 行 距 離 | ①約30km(60Ah)<br>②約40km(73.5Ah)  | ①約22km(22NF)<br>②約33km(24GEL) | 約25km                              |

\*走行距離の表示は目安であり、バッテリーの状態や走行状況によって変わります。

|                    |                               |                               |                               |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 登 坂 角 度            | 10°                           | 9°                            | BRIDGE 10°<br>BRIDGE-MD 6°    |
| 総 重 量<br>(バッテリー含む) | 105~185kg前後<br>(スペックにより異なります) | 120~170kg前後<br>(スペックにより異なります) | 82kg                          |
| 耐 荷 重              | 135kg/160kg                   | 135kg                         | 125kg                         |
| フレームカラー            | 5色(本体)<br>(フレームは黒)            | 10色(本体)<br>(フレームは黒)           | BRIDGE 5色<br>BRIDGE-MD 4色(本体) |

\*上記の数値は、インチサイズをミリサイズに変換しているため、若干数値に誤差があります。

\*細かいスペックや各オプションは、オーダーフォームをご参照ください。